


2 этаж



1 этаж

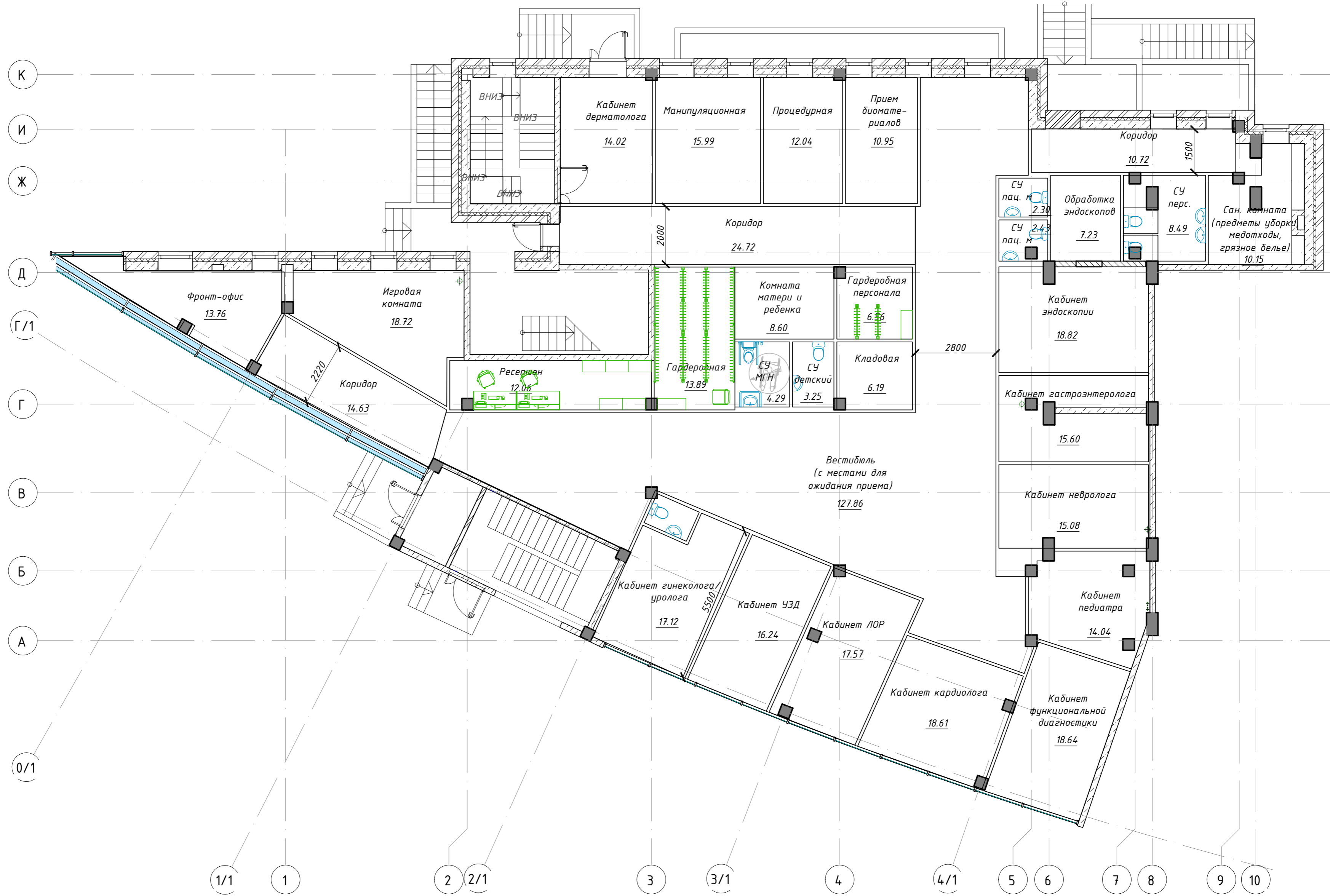


				г. Санкт-Петербург				
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Детско/взрослая поликлиника	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Демидова			01.23		ЭП	1	1
Проверил				01.23				
ГИП				01.23	План 1-2 этажей	 <b>Медицинские системы и технологии</b>		
Н.контр.				01.23				

Имя, №подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Ссылка на объект

### Цокольный этаж

Квенч-труба для аварийного сброса гелия. Уточнить точку вывода, показано условно

Оградить площадку 4x4 м. Не допускать наличие открывающихся окон на 6 м выше выхода квенч-трубы. Рядом с местом выхода установить информационный щит желтого цвета не менее 40x60 см "восклицательный знак в треугольнике" и предупреждающую табличку "Внимание опасность! Выброс чрезвычайно холодного газа! Не входить во время работы МРТ!"

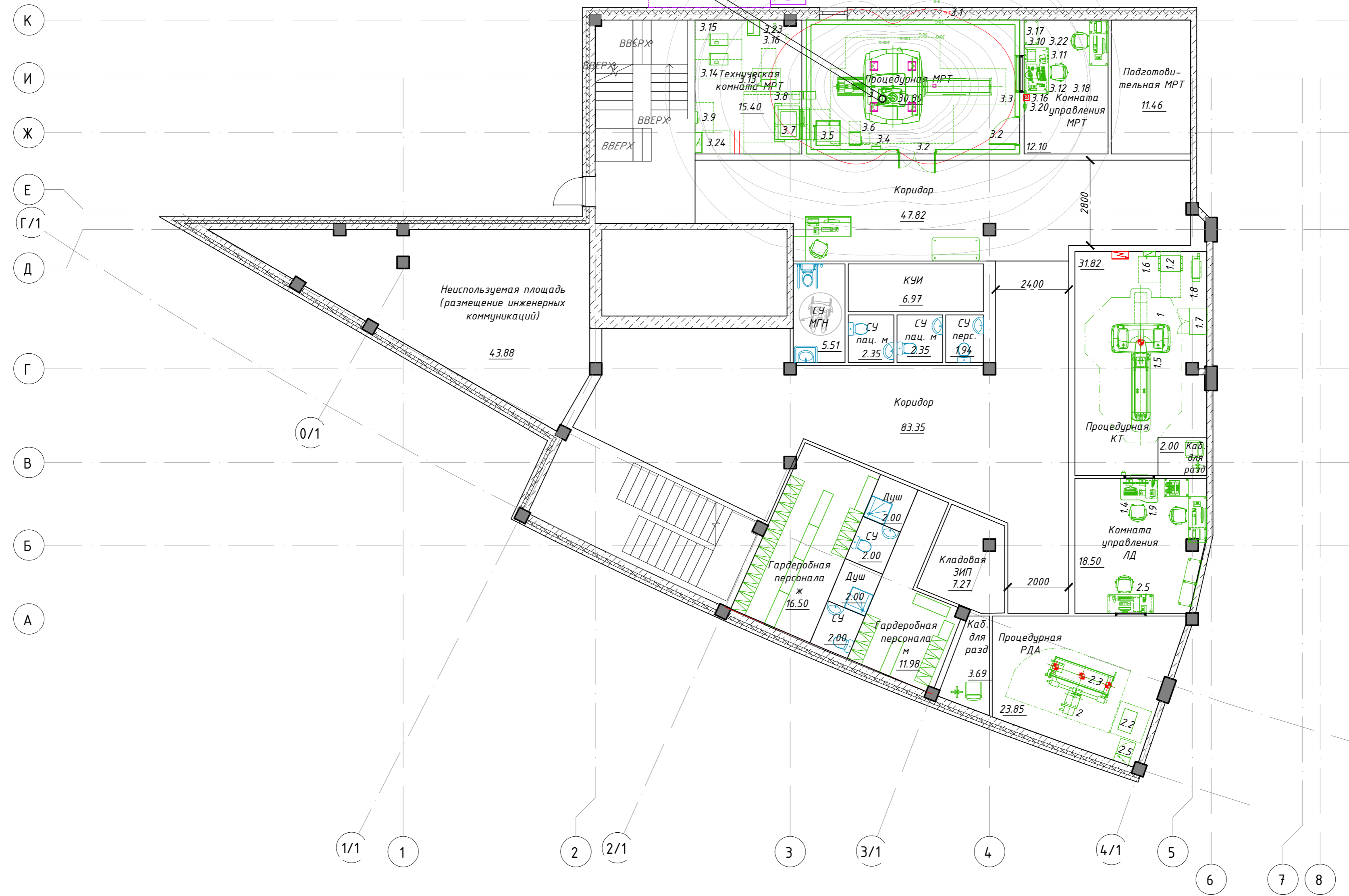

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

г. Санкт-Петербург					
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Демидова		01.23	
Проверил				01.23	
ГИП				01.23	
Н.контр.				01.23	
Детско/взрослая поликлиника			Стадия	Лист	Листов
Цокольный этаж			ЭП	1	1
			Медицинские системы и технологии		
Формат А2					